


MEDISHARP

POUBELLES BLINDÉES À AIGUILLES

TOUTES ÉNERGIES

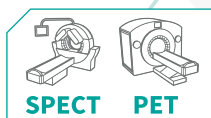

PRODUITS ASSOCIÉS

- Protège-seringues Mediclic
- Protège-seringues Easyview
- Chariot de transport combiné

La **poubelle blindée Medisharp** est un **mini stockeur de pailleuse pour collecteur d'aiguilles usagées** et contaminées, utilisé pour réceptionner les aiguilles et seringues après injection manuelle de médicaments radiopharmaceutiques. Déclinée en **2 modèles de blindage**, la version **Medisharp Basse & Moyenne Énergie** dispose d'une **épaisseur de plomb de 3 mm** pour correspondre aux radioisotopes tels que le ^{99m}Tc , ^{111}In , ^{201}Tl , ^{177}Lu alors que la version **Medisharp Haute Énergie** se distingue avec **16 mm de plomb** pour garantir la protection nécessaire lors du stockage des déchets contaminés avec du ^{18}F et ^{68}Ga par exemple. Conçues en plomb avec une **finition inox**, les **décontaminations bactériologiques et radioactives sont simplifiées**. Deux ouvertures, totale ou partielle, sont disponibles pour plus d'**ergonomie** lors des manipulations.

L'**ouverture totale** du couvercle permet le changement du collecteur et le nettoyage de l'intérieur de la poubelle.



L'**ouverture partielle** disponible grâce au guichet pivotant permet de s'adapter à la taille du déchet à jeter en **limitant ainsi l'exposition des utilisateurs**.



Une poignée située sur le guichet facilite l'ouverture et la fermeture de la Medisharp quel que soit le modèle Basse & Moyenne Énergie ou Haute Énergie tout en limitant les risques de contamination pour l'opérateur. Ce type de poubelle blindée peut être positionné sur **pailleuse** mais également sur un **chariot de soins de type « chariot de transport combiné pour injection »**.

CARACTÉRISTIQUES

Générales	Medisharp BME	Medisharp HE
Dim. extérieures :	L 217 x P 218 x H 319 mm	L 254 x P 243 x H 349 mm
Dim. intérieures :	L 163 x P 155 x H 215 mm	
Poids :	16 kg	54 kg
Collecteur d'aiguilles DASRI compatible :	AP Medical 2L (Réf : DISPO 2L) AP Medical PBS 2L NEW (Réf : 14546)	
Radioprotection :	3 mm de plomb	16 mm de plomb
Colisage :		
Dim. colis :	L 230 x P 250 x H 350 mm	L 300 x P 400 x H 500 mm
Poids :	21 kg	58 kg
Réf :	00034047	00034048

